

Egy cement **valamennyi indikációra** biztos végeredménnyel. Ez a PANAVIA V5!

A **PANAVIA V5** a valaha volt **legerősebb** műgyanta alapú, **fluorid leadó, színtabil** ragasztócement, és az **5 színének** (Universal A2, Opaque, White, Transparens, A4 Brown) köszönhetően a legesztétikusabb is!

A Try-In paszták segítenek a megfelelő szín kiválasztásában.

Használata **három egyszerű lépésből** áll. A fog kezelése az arra való primerrel (Tooth Primer), a pótlás érdesítése majd kezelése az arra való primerrel (Clearfil Ceramic Primer Plus), végül ragasztás a PANAVIA V5 cementtel.

Mivel a PANAVIA V5 paszta **nem tartalmaz monomert**, nincs elszíneződés és a vízdékonyság is minimális. A megszokott amin-peroxid rendszert helyett egy új, amin mentes formulát és egy új, hidrofil monomert tartalmaz, mely a polimerizáció során hidrofóbbá válik, és ez nagyban elősegíti a cement színtabilitását.

A **Tooth Primer MDP-t tartalmazó** önsavazó primer, ennek köszönhető, hogy extrém erős kötés jön létre a fogstruktúrák és a ragasztócement között.

Számos tanulmány rámutatott, hogy a legtöbb duál kötésű cement esetében szükséges a megvilágítás ahhoz, hogy erős kötés alakuljon ki. Az MDP-bázisú Panavia V5 Tooth Primer megoldja ezt a problémát és egészen kivételes kötéseket biztosít valamennyi fogstruktúrához önkötő módon is.

A **Ceramic Priemer Plus** az eredeti **MDP adhezív monomer** mellett **γ -MPS silane monomert** is tartalmaz, ezért kémiaailag kötődik valamennyi szilikát bázisú kerámiához (lítium-diszilikáthoz is), cirkóniumhoz, kompozithoz és fémhez. **Tehát elég egy féle cementet tartania a rendelőben!**


INDIKÁCIÓK

Koronák, hidak, inlay-k, onlay-k ragasztása
Héjak ragasztása
Adhezív hidak és szalagok ragasztása
Ragasztás implantátum felépítményekre
Csapok ragasztása

ELŐNYÖK

Használható valamennyi indikációra, beleértve az adhesív hidakat és héjakat is!!!!
Automix kiszerelés
5 színben elérhető
Vékony rétegvastagság (12 μ)
A felesleg könnyen eltávolítható
Fluoridot ad le
Nagy mechanikai stabilitás és kötése
Megbízható széli zárás

Az **MDP monomernek** köszönhetően a Panavia V5 a legerősebb ragasztócement

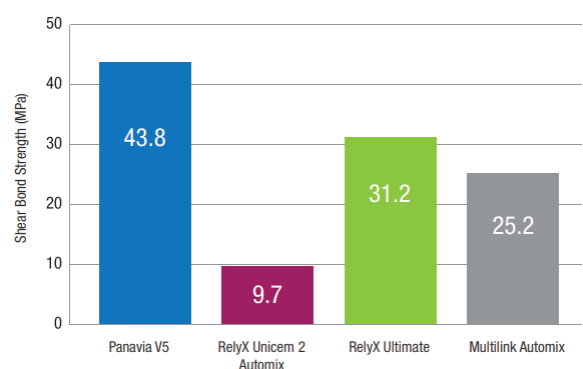

A fenti ábra a Dental Advisor független vizsgálatának eredményeit mutatja, amelyben a dentinhez való kötődést mérték