

Így néz ki a gyakorlatban



III. osztályú kavitás



1 rétegű restauráció A2-es
CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic-kel.



Felső metszőfogak közötti diasztéma.



Helyreállítás A2-es és A3-as
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic-kel.

Courtesy of Dr. J. D. Scholtenius,
Wiergea/The Netherlands

Színskála és rendelési információk:



CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic

- 2160 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic A1 (3.6 g/2 ml)
- 2161 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic A2 (3.6 g/2 ml)
- 2162 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic A3 (3.6 g/2 ml)
- 2163 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic A3.5 (3.6 g/2 ml)
- 2164 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic A4 (3.6 g/2 ml)
- 2166 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic B2 (3.6 g/2 ml)
- 2167 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic B3 (3.6 g/2 ml)
- 2170 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic C3 (3.6 g/2 ml)
- 2172 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic T (3.6 g/2 ml)
- 2173 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic E (3.6 g/2 ml)
- 2174 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic XL (3.6 g/2 ml)
- 2175 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic OC (3.6 g/2 ml)
- 2177 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic OA2 (3.6 g/2 ml)
- 2178 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic OA3 (3.6 g/2 ml)
- 2179 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic OA4 (3.6 g/2 ml)
- 2182 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic HO (3.6 g/2 ml)
- 2185 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic AM (3.6 g/2 ml)
- 2152 EU CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic shade guide

kuraray

Noritake



CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic

PRÉMIUM MINŐSÉG A MINDENNAPOKRA!

Esztétikában a legjobb.

**Megkülönböztethetetlen a természetes foganyagtól.
Kiváló radiopacitás. Fluoreszcens, mint a valódi.**

FORGALMAZÓ

Pro-Dental Kft.
4032 Debrecen, Sántha Kálmán utca 7.
Tel/Fax: 52/416-900
Email: info@prodental.hu
Web: www.prodental.hu

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

PRO-DENTAL KFT.

BPD ONE 1A 0.3 MAC 8/2017 MA00028

Estétikában a legjobb.

Mindössze egy egyszínű rétegben.

A kiterjedt többretegű tömés már a múlté. A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic-kel többé nincs szükség több színű rétegekre egy esztétikus tömés elkészítéséhez. Csak válasszon egy odaillő színt.



Kavitás



Restauráció CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic-kel – mindössze 1 árnyalattal




Restauráció egy normál esztétikus kompozittal egy árnyalatot használva. Sötét árny látható.


A hagyományos esztétikus kompozitokat többszínű rétegben kell alkalmazni a fog természetes kinézetének helyreállítása érdekében. A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic képes erre mindössze egy árnyalattal.

Fényszórás mint a kifejlett foganyag esetében

A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic-kel pontosan reprodukálhatók a természetes foganyag optikai tulajdonságai. A hagyományos kompozitokkal szemben a tömészések láthatatlanok lesznek.

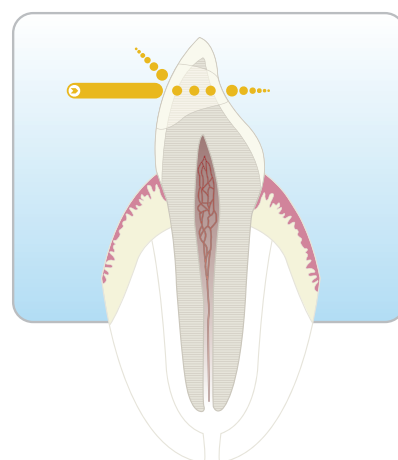


A legtöbb kompozit átengedi a fényt

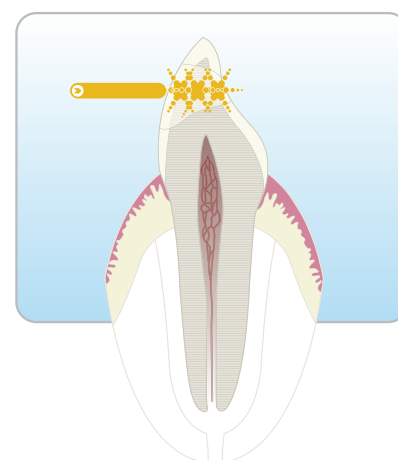

A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic természetesen szórja a fényt

A természetes foganyag elnyeli, majd szétszórja a fényt minden irányban. Egyedülálló összetételének köszönhetően a CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic közel azonos tulajdonságokat biztosít. A hagyományos kompozitok viszont gyakran sötétebbnek látszanak a természetes fognál, mivel elnyelik, és nem szórják a fényt.

Új töltőanyag egyedülálló összetételben.

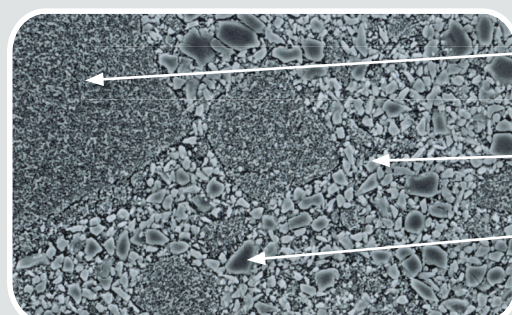

Fényszóró részecske.

Az új fejlesztésű szerves töltőanyag nagy transzparenciájú nanoszemcséket tartalmaz. Ezek úgy szórják a fényt, mint a természetes foganyag.

Nagy fénytörést mutató mátrix.

A mátrix nagy fénytörést mutat, ami csökkenti a polimerizáció utáni színváltozást.


Radiopak nanoszemcsék.

Az új töltőanyagnak köszönhetően a CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic jól látható a röntgenfelvételen és magas fényre polírozható.

By courtesy of Dr. Toshimoto Yamada, DDS, PhD/Toranomon Hospital

Nehezen megkülönböztethető a természetes foganyagtól.

A legkisebb színváltozás polimerizáció után!

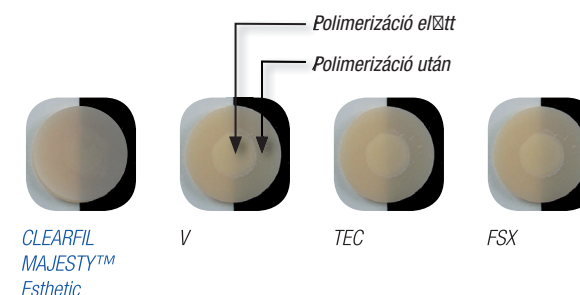


A tény, hogy a CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic csak minimálisan változtatja színét a polimerizáció során, még könnyebbé teszi a munkát. Már munka közben látható, hogy megfelelő-e a szín. Más esztétikus kompozitok általában transzparensabbé válnak megvilágítás után.

További előnyök:

- A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic kevésbé érzékeny a környezeti fényre. 4,5 perces feldolgozási idejének köszönhetően majdnem kétszer annyi ideig dolgozhat vele, mint más kompozitokkal, amelyek ennyi idő alatt megkötnek.
- Könnyen kezelhető és nem tapad a műszerekhez.
- A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic nagy kopásállósággal bír, így probléma nélkül használható bármilyen típusú kavitás helyreállítására.


Könnyű színválasztás.

Standard színek

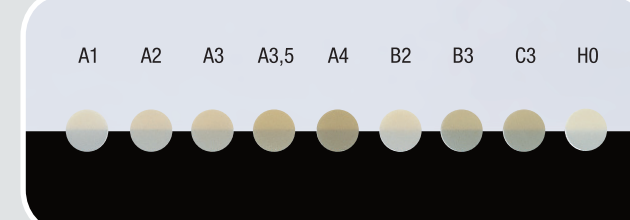


A 9 standard szín segítségével a tömések többsége ellátható. Emellett 8 kiegészítő szín áll rendelkezésre a bonyolultabb esetek megoldásához.

Kiegészítő színek.

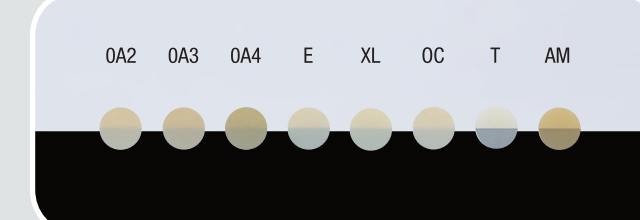

HO: Hollywood Opaque, T: Transparens, AM: Borostyán, E: Zománc, XL: Extra Light, OC: Okkluzális

Jó radiopacitás. Fluoreszens, mint a valódi.

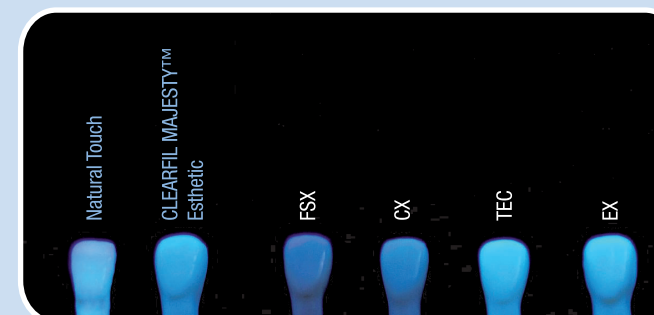

A kavitásba történő behelyezés után a CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic nehezen megkülönböztethető a természetes foganyagtól. A radiopacitásának köszönhetően viszont a tömőanyag könnyen lokalizálható. A CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic a fluoreszcenciájának köszönhetően is nehezen megkülönböztethető a természetes foganyagtól.